

unlockcapture**&**share





Wir stellen Ihnen unsere neue Moticam X und MoticHUB Technologie vor, zwei einzigartige Methoden, um sofort ein Upgrade Ihres vorhandenen Mikroskops zu erhalten.

Werfen Sie Ihre alten Mikroskope nicht weg. In Zeiten von Budgetkürzungen ist die Wiederverwendung von Investitionen besser als sie wegzuwerfen. Bei Motic haben wir zwei einzigartige Lösungen entwickelt, um fast jedes Mikroskop zu einem drahtlosen Tablet-bereiten, gemeinsam benutzbaren Gerät umzuwandeln.





motic'sfreeapp



MotiConnect

MoticamX



Die **Moticam X** ist wie alle unsere Moticam Lösungen ein "All-In-One-Box" Produkt. Die MoticamX ist eine hochauflösende **WiFi-Streaming Kamera**; das macht sie eine Stufe besser als die anderen. Durch den Aufbau eines eigenen drahtlosen Netzwerks melden Sie sich einfach mit Ihrem Android oder iOS Tablet an und **betrachten, nehmen auf und bearbeiten Live-Bilder** von Ihrem Mikroskop mit unserer **kostenlosen App MotiConnect**.

Für den Fall, dass Ihre Schule einen Download von Apps nicht erlaubt oder Sie es ganz schnell brauchen, ist die Moticam X mit seiner eigenen **on-board Software ausgerüstet, die einfach mit einem Web Browser gesteuert werden kann**, was Ihnen die Bildaufnahme und Messung ermöglicht. Bei Motic rüsten wir alle unsere Lösungen standardmäßig mit Lern-Tools aus. Die Moticam X arbeitet auch mit einem WiFi Laptop mit Windows XP oder höher, wobei die Kamera mit unserer Standard Motic Images Plus Software benutzt werden kann, sodass Sie dieses Gerät mit dem interaktiven Whiteboard Ihres Klassenzimmers verwenden können.



MoticHUB



Die **MoticHUB** Technologie ist in unserer Motic Images Plus Software **integriert**, was die vorhandene verkabelte Moticam oder Ihr Digitalmikroskop (ursprünglich mit Motic Software ausgerüstet) in eine **WiFi Streaming digitale Lösung** umwandelt.

Diese **kostenlose zusätzliche Funktion** ermöglicht es Ihnen, **Ihr digitales Mikroskop oder Kamera** an Ihren vorhandenen WiFi-PC anzuschließen und dann das Bild durch Ihr vorhandenes Netzwerk zu Streamen und andere es auf ihr **WiFi-Tablet** oder PC holen.

iPad


08:47

Main Menu

Gallery

Live Cam

Un

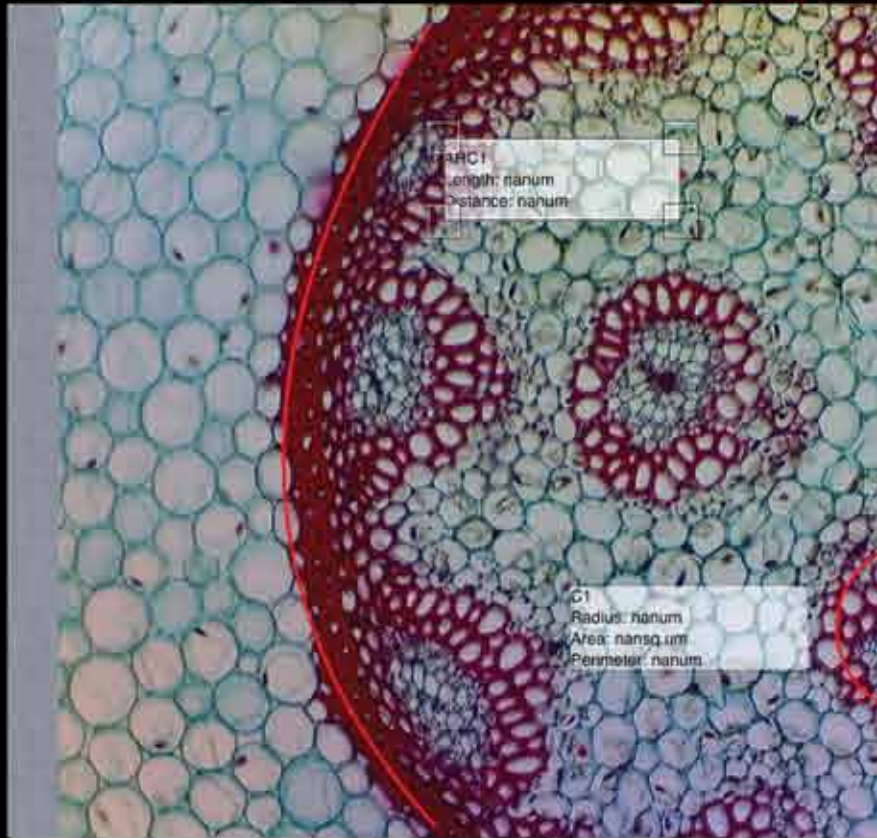



www.moticeurope.com

The Official European Motic Website

Moticam X

Allgemeine Spezifikationen

Sensor Typ	CMOS
Sensor Auflösung	2,0MP
WiFi Auflösung	1280x1024 Pixel (1,3MP)
Optische Berechnung	1/3"
Fokussierbare Linse	12mm
Kalibriermaßstab	Inklusive
Makrotubus	Inklusive
Stromversorgung	Durch zur Verfügung gestellten Schaltnetzteil-Adapter
Betrachtereinheiten	WiFi fähiger PC oder Laptop: <i>Motic Images Plus 2.0 für PC</i> Tablet oder Telefon: <i>Frei herunterladbare App MotiConnect</i> Universalbetrachter: <i>Fast jeder HTML 5 unterstützte Webbrowser</i>

DE | EN | ES | FR | IT | PT | RU